



COOL



Manuel d'utilisation

ROHS

CE



ATTENTION:

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.
- En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



- Avant d'utiliser les appareils, lire les instructions soigneusement, et ranger le manuel pour vous y référer ultérieurement.

A propos de la réflexologie des pieds

La réflexologie des pieds est une méthode de stimulation des réflexes dans les pieds, de manière à causer des réactions dans des parties correspondantes du corps. De telles réactions apparaissent sous la forme de relaxation ou d'équilibrage des écoulements d'énergie dans le corps. Du fait que le corps humain possède un système immunitaire destiné à exécuter certaines fonctions de cicatrisation naturelle, la réflexologie peut stimuler efficacement la totalité de notre corps et peut de ce fait encourager le retour à l'homéostasie dans tout le système complexe du corps.

Traitement utilisant les points d'acupuncture

Les points d'acupuncture sont des points de notre corps qui ont une résistance électrique inférieure à celle des zones environnantes. Quand on les relie l'un à l'autre, ils forment une ligne appelée méridien qui fournit un canal pour l'écoulement d'énergie. Un méridien correspond à un organe ou à un système du corps. Un traitement régulier sur certains points d'acupuncture aide à harmoniser les écoulements d'énergie, à traiter l'apparition des maladies et à maintenir une bonne santé.


Précautions de sécurité

Le masseur à ondes électromagnétiques biologiques a été développé par un groupe de médecins et d'ingénieurs électroniciens au moyen de recherches rigoureuses. Le courant utilisé a été ramené à une tension de 12 V alternatifs au moyen d'un adaptateur à courant alternatif approuvé internationalement.

Il est cependant recommandé de lire le guide d'utilisation avant de commencer à utiliser l'appareil.

1. N'utiliser l'appareil que dans le but prévu.
2. N'utiliser que les accessoires fournis par nous..
3. Ne pas exposer l'appareil à une température élevée.
4. Ne pas verser de liquide sur l'appareil ni sur ses accessoires.
5. Ne pas surcharger l'alimentation électrique.
6. Si vous avez l'intention de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée, retirer les batteries de la télécommande.

7. En cas de dysfonctionnement de l'appareil, le débrancher de la source d'énergie et entrer immédiatement en contact avec un agent autorisé.
8. Ne cherchez pas à réparer vous-même l'appareil ou à le faire réparer par des agents non autorisés, du fait que cela pourrait invalider la garantie.
9. Mettre l'appareil et les accessoires hors de portée des jeunes enfants.
10. Ne pas placer les électrodes sur de la peau endommagée.
11. La surface du capot de la lumière infrarouge est très chaude. Les personnes qui ne sont pas sensibles à la chaleur doivent y porter encore plus d'attention lors de l'utilisation.

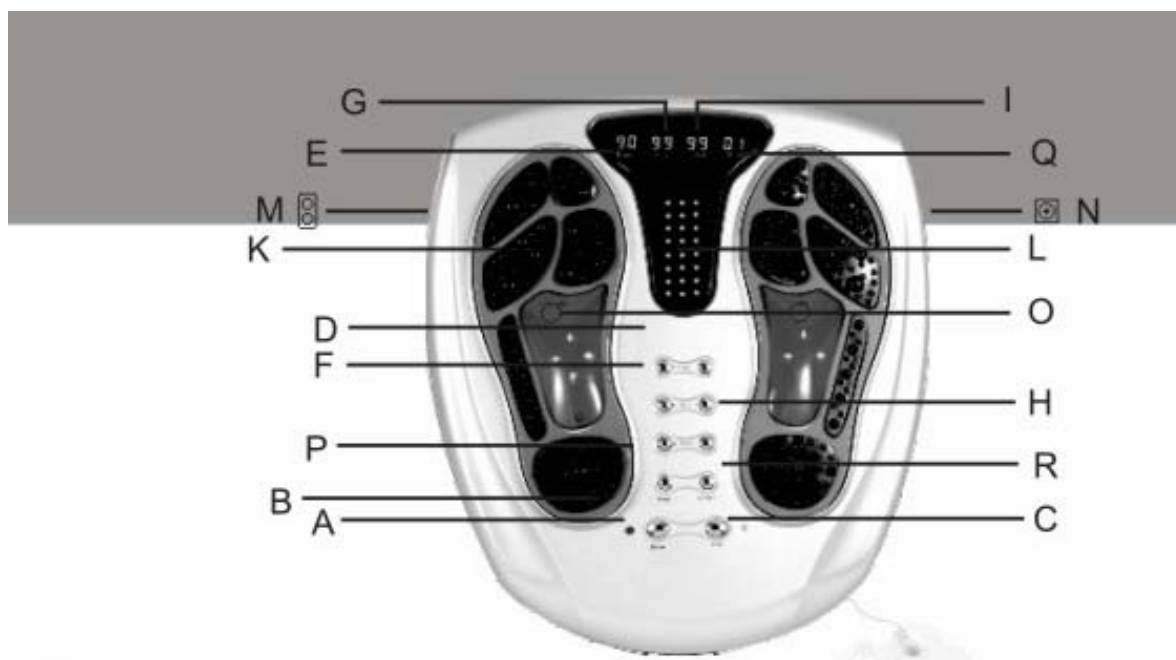

A. Alimentation

B. Affichage source d'énergie

L'affichage s'allume quand l'appareil est connecté à la source d'énergie.

C. Bouton programme automatique

En appuyant sur ce bouton, vous pouvez choisir entre 50 types différents de modes ou utiliser automatiquement et alternativement les 50 modes. Chaque pression peut faire passer à un nouveau mode.

D. Bouton de commande de temps

Appuyer sur "+" pour augmenter le temps de pression et sur "-" pour réduire le temps de pression.

E. Affichage du temps

Il peut afficher la durée de massage désirée.

F. Bouton de commande d'intensité (plante du pied)

Appuyer sur "+" pour augmenter l'intensité des ondes électromagnétiques et sur "-" pour la réduire.

G. Affichage de l'intensité (plante du pied)

Peut afficher la valeur de l'intensité de la stimulation de la surface d'excitation de la plante du pied.

H. Bouton de commande de l'intensité (amaigrissement et soins curatifs sur les parties du corps)

Appuyer sur "+" pour augmenter l'intensité de l'onde électromagnétique biologique et sur "-" pour la réduire.

I. Affichage de l'intensité (amaigrissement et soins curatifs sur les parties du corps)

Peut afficher la valeur de l'intensité d'amaigrissement et des soins curatifs dans les parties du corps.

J. Massage des parties supérieures du corps par les plaquettes électromagnétiques biologiques

K. Panneau de stimulation des plantes de pieds par les plaquettes électromagnétiques biologiques

Il s'agit d'un élément principal destiné à la stimulation de la zone réflexible de la plante du pied, qui est directement en contact avec la plante du pied.

L. Affichage des ondes électromagnétiques biologiques

En cas de choix de modes différents d'onde électromagnétique biologique, l'affichage sera différent.

M. Prise pour les câbles de raccordement des plaquettes à ondes électromagnétiques biologiques

Elle est destinée à brancher la fiche des ondes électromagnétiques biologiques.

N. Prise pour les câbles de raccordement de l'adaptateur

Elle est destinée à brancher la fiche de l'adaptateur.

O. Acupuncture à chaleur infrarouge

L'acupuncture à chaleur infrarouge vous fait profiter d'un massage à pénétration profonde.

P. Mode de fonctionnement

En appuyant sur ce bouton, vous pouvez choisir un type de mode de fonctionnement parmi 50 types de mode de fonctionnement. Chaque pression peut faire passer à un nouveau mode.

Q. Affichage du mode de fonctionnement

R. Infrarouge

En appuyant sur "infrarouge", vous pouvez profiter de la thérapie infrarouge ; une autre pression sur "infrarouge" peut couper la thérapie infrarouge.

Utilisation correcte

1. Raccorder l'adaptateur à l'appareil et brancher sur la prise.
2. Nettoyer les parties connectées sur lesquelles les plaquettes à ondes électromagnétiques biologiques sont placées, (il est préférable d'humidifier les plaquettes de manière à ce qu'elles soient en contact direct avec le corps), une extrémité des câbles étant raccordée avec les capots, l'autre extrémité étant connectée avec la machine.
3. Placer vos pieds propres (**sans les chaussettes**) sur le panneau de stimulation et s'assurer que vos plantes de pied touchent complètement les éléments noirs sur le panneau de stimulation.
4. Mettre l'interrupteur sur Marche

5. Appuyer sur le bouton "INTENSITE" de la télécommande afin de sélectionner l'intensité "+" pour renforcer et l'intensité "-" pour l'affaiblir).
6. Appuyer sur le bouton "MINUTERIE" de la télécommande pour sélectionner la durée d'utilisation (5 minutes/10 minutes/--90 minutes).
7. Utiliser le bouton "AUTO" de la télécommande pour sélectionner le programme automatique qui va changer le mode d'onde électromagnétique biologique toutes les minutes. Il existe au total 50 types de modes d'onde électromagnétique biologique.
8. Si vous désirez sélectionner un seul type d'onde électromagnétique biologique, appuyer sur "MODE" de manière à choisir le mode désiré et appuyer ensuite sur le bouton "AUTO" une fois que l'onde électromagnétique appropriée apparaît.
9. La machine s'arrêtera automatiquement de fonctionner à l'expiration du temps fixé.
10. Il est recommandé de boire 500 cm³ d'eau tiède avant et après utilisation de cet instrument.
11. Quand l'instrument n'est pas en utilisation, débrancher la fiche de la prise électrique.

Utilisation des électrodes

Utilisation des électrodes

L'appareil est fourni avec un ensemble d'électrodes qui peuvent être utilisées pour traiter une zone de étendue ou des points spécifiques. Elles fonctionnent avec la même onde électrique que l'appareil à pieds.

1. Pour le traitement du corps, s'assurer que la surface de la peau est exempte de saleté, d'huile, de sueur ou de poudre avant d'appliquer les électrodes.
2. Poser le câble d'électrodes sur les électrodes et le raccorder à l'appareil.
3. Noter que les électrodes doivent être utilisées en paire avec un espacement maximal de 1 cm entre celles-ci. On peut le voir aussi sur l'appareil à pieds.
4. Appuyer sur le bouton d'intensité du corps pour régler le niveau d'intensité désiré.
5. Quand le temps de traitement est expiré, retirer doucement les électrodes de la peau afin de prolonger la durée de vie du produit. Après chaque utilisation, placer les électrodes sur le support en plastique fourni.
6. Boire de l'eau tiède ou à la température du robinet après la thérapie afin d'aider à la détoxification.
7. Ne pas faire entrer une plaquette en contact direct avec les autres plaquettes.

Questions fréquemment posées

1. Dois-je prendre un bain avant utilisation ?
Pas nécessairement, mais il est de bonne hygiène de laver les côtés de vos pieds avant utilisation.
2. Quel niveau d'intensité dois-je employer ?
Il n'existe pas de niveau fixe d'intensité à respecter du fait que chaque individu possède un niveau différent de résistance électrique. Vous devez régler l'intensité jusqu'à ce que vous éprouviez une sensation de confort.
3. Vais-je obtenir les meilleurs résultats avec le réglage maximal de l'intensité ?
Si le traitement vous apporte le confort et que vous puissiez ressentir que vos muscles sont stimulés, il est probable que vous êtes au réglage d'intensité approprié. L'emploi d'un réglage d'intensité trop élevé peut faire trop travailler vos muscles et vos réflexes, ce qui peut entraîner des douleurs, de la fatigue ou l'aggravation d'un symptôme existant. Si vous atteignez un réglage élevé sans pouvoir ressentir une forte sensation, vérifier que vos muscles ne travaillent pas trop.
4. Pourquoi ai-je besoin d'un niveau plus élevé d'intensité pour ressentir l'électro-simulation ?
Si vos pieds sont secs ou que votre corps est déshydraté, vous pouvez avoir besoin d'un niveau plus élevé d'intensité pour ressentir l'effet de l'électro-simulation. On peut y remédier en humidifiant les pieds. Si vous avez une blessure (interne ou externe) ou un dommage neurologique (dans le cas de victimes d'une attaque ou de diabétiques), vous pouvez avoir besoin

d'un niveau plus élevé d'intensité pour ressentir l'effet de l'électro-simulation. Différemment, vous pouvez renforcer la stimulation en ajoutant des électrodes sur le membre qui ressent une faible sensation.

5. Quel est le temps d'utilisation recommandé par séance et combien de fois par jour ?
Des études ont montré que 30 minutes étaient un temps de traitement à choisir pour l'électrothérapie. Cet appareil a été préréglé pour des séances de 30 minutes : toutefois, vous pouvez régler différemment la durée de séance si nécessaire. Vous pouvez aller jusqu'à 6 séances de 30 minutes ou jusqu'à un total de 3 heures de traitement par jour. Dans les deux cas, des intervalles réguliers sont nécessaires entre les séances.
6. Puis-je traiter en même temps les plantes de pieds et le corps ?
Oui, du fait qu'on va utiliser les mêmes formes d'onde et qu'il y a des commandes d'intensité séparées pour les plantes de pied et le corps.
7. Dois-je insister sur certains réflexes pendant la thérapie comme le font habituellement les réflexologues traditionnels ?
Pas nécessairement. La technologie moderne a remédié aux limitations de la main de l'homme. Le but de la réflexologie est de stimuler l'ensemble du corps, dans le but d'encourager le retour à l'homéostasie dans tout le système complexe du corps. Les différentes formes d'onde utilisées dans l'appareil sont capables d'opérer sur la totalité des pieds, quelles que soient les zones qui mettent en évidence le problème, en insistant seulement sur certaines zones des pieds pendant le traitement afin d'accélérer ces résultats.
8. Vais-je m'électrocuter si mes pieds sont humides ?
Non, du fait que le courant électrique a été ramené à une tension de 12 V alternatifs. Les plaquettes destinées aux pieds sont en outre constituées de caoutchouc, de sorte qu'elles sont très sûres.
9. Puis-je prendre un bain immédiatement après la thérapie ?
Il est recommandé de respecter une pause de 10 à 15 minutes avant de se doucher. Ceci parce que la température de votre corps va augmenter du fait de l'amélioration de la circulation du sang.
10. Puis-je utiliser l'appareil immédiatement après un repas ?
Il est recommandé de respecter une pause de 30 minutes avant l'utilisation.
11. Est-il nécessaire que je boive un verre d'eau après la thérapie ?
Oui, cela aide au processus de détoxification.
12. L'appareil est-il sûr pour l'utilisation sur des entorses et des ligaments froissés ?
Ne pas utiliser l'appareil sur des entorses pendant les 6 premières semaines. Laisser reposer pendant 2 à 6 semaines avant d'utiliser l'appareil sur des entorses. Quant aux ligaments froissés, laisser reposer 6 mois avant de commencer.
13. Pourquoi me sens-je somnolent après l'utilisation ?
Il en est ainsi parce que votre corps et votre esprit sont relaxés après la thérapie.
14. Que dois-je faire si je trouve la thérapie trop forte même au plus faible niveau d'intensité ?
Vous devez réduire le niveau d'intensité et si le niveau est déjà au minimum, réduire la durée et changer la fréquence.
15. Mes symptômes semblent avoir empiré depuis que j'utilise l'appareil. Est-ce normal ?
Ne vous alarmez pas. Il est tout à fait normal que des symptômes tels que des douleurs, des algies et des enflures puissent empirer pendant la phase initiale du traitement. Ceci peut se produire si le corps ne s'est pas encore adapté à l'augmentation de la circulation du sang et de la stimulation des muscles. Médicalement, on appelle cela l'acclimatation. Réduire l'intensité de la

séance, la durée de traitement et la fréquence. Ces effets secondaires disparaîtront automatiquement à la fin de la phase d'adaptation.

16. L'appareil est-il sûr pour tout le monde ?

Les patients souffrants de maladies cardiaques ou de tumeurs malignes, les femmes enceintes ou les personnes venant de subir une intervention chirurgicale doivent demander l'avis d'un médecin avant d'utiliser l'Electro-Réflexologue.


Entretien et maintenance

1. Avant d'appliquer les électrodes, nettoyer la peau afin d'être sûr qu'elle soit exempte de sueur ou de saleté.
2. Placer les électrodes sur le support en plastique après chaque utilisation.
3. Il est nécessaire de retirer doucement les électrodes de la peau afin d'améliorer la durée de vie du produit.
4. Frotter périodiquement les électrodes avec quelques gouttes d'eau propre afin d'améliorer leurs qualités adhésives.
5. Ne pas nettoyer l'appareil ni les électrodes avec un détergent puissant.
6. Éviter de laisser tomber, cogner ou secouer l'appareil.
7. Ne pas soumettre l'appareil ni ses accessoires à une température extrême, à une humidité excessive, à la saleté ou à la poussière.
8. Maintenir toujours l'appareil et ses accessoires secs et propres.


Schéma
d'application des
points
d'acupression

Réservé
strictement aux
produits
BODYCARE


MIGRAINE NERVEUSE

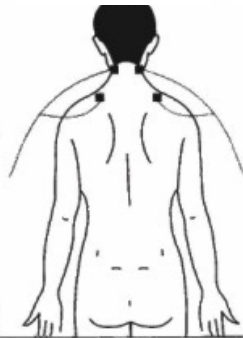


MAL AUX DENTS

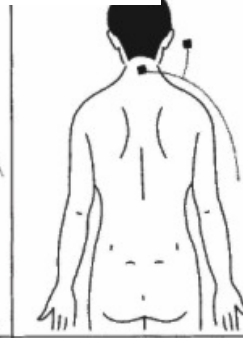


DIABETE

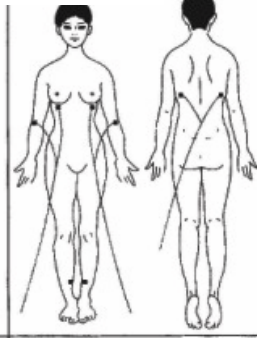


MANQUE D'APPETIT

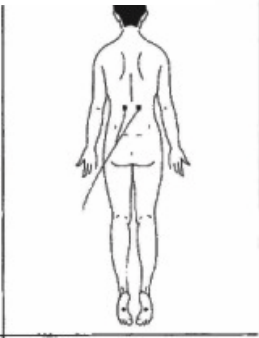


PHYSIOTHERAPIE POST-TRAUMATIQUE

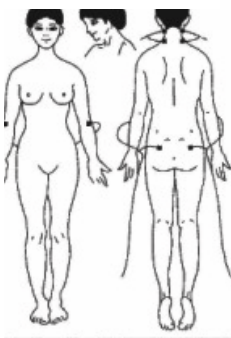


ASTHME

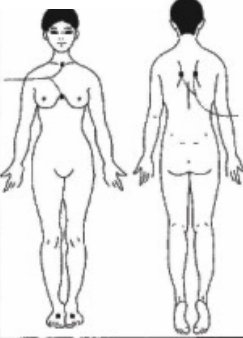


ENURESIE

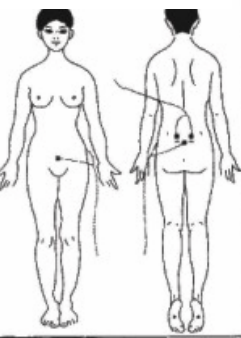


IMPOTENCE

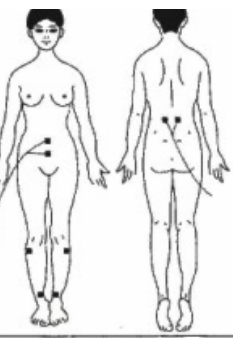


LUMBAGO

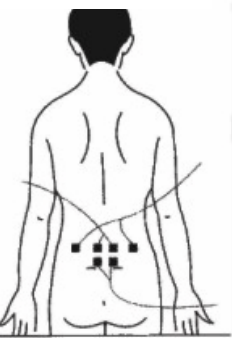


INSOMNIE

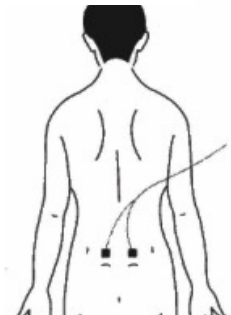


AMELIORATION DE LA VALEUR DE LA TENSION ARTERIELLE

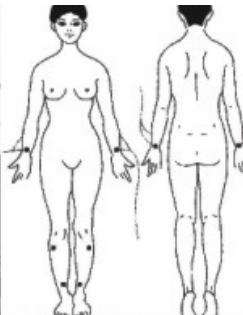


DOULEURS D'ESTOMAC

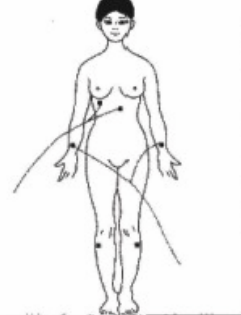


SYNDROME PRE-MENSTRUEL

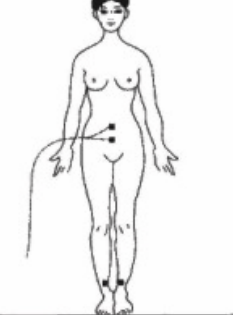


DOULEURS MUSCULAIRES AU BRAS

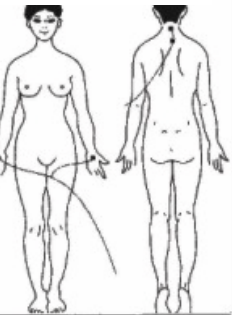


DOULEURS A L'EPAULE

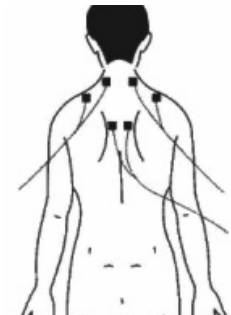


CRAMPES DANS LES MAINS

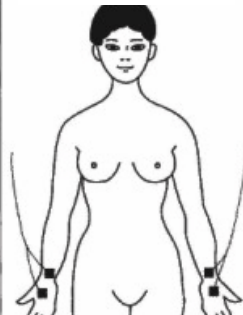

DOULEURS MUSCULAIRES A LA JAMBE

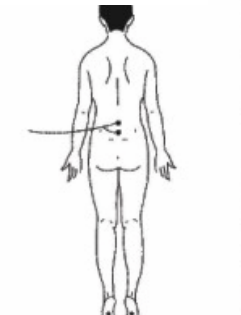

RAFFERMISSEMENT DU BUSTE ET TONIFICATION DES MUSCLES DES CUISSES

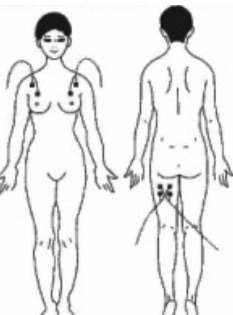

OSTEOARTHRITE

